

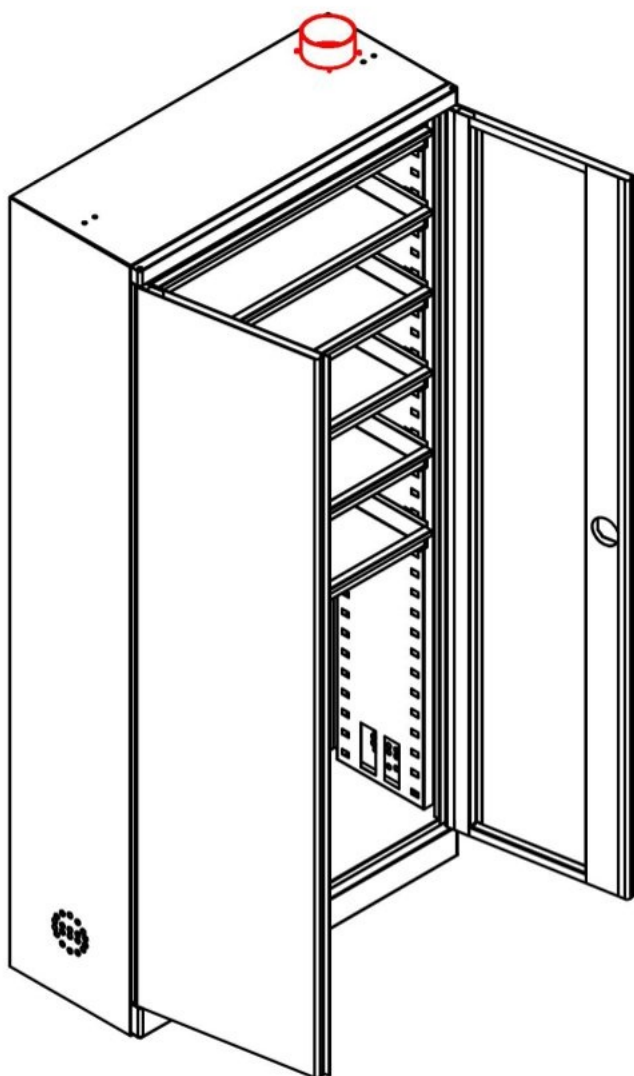


229275

MONTÁŽNÍ NÁVOD

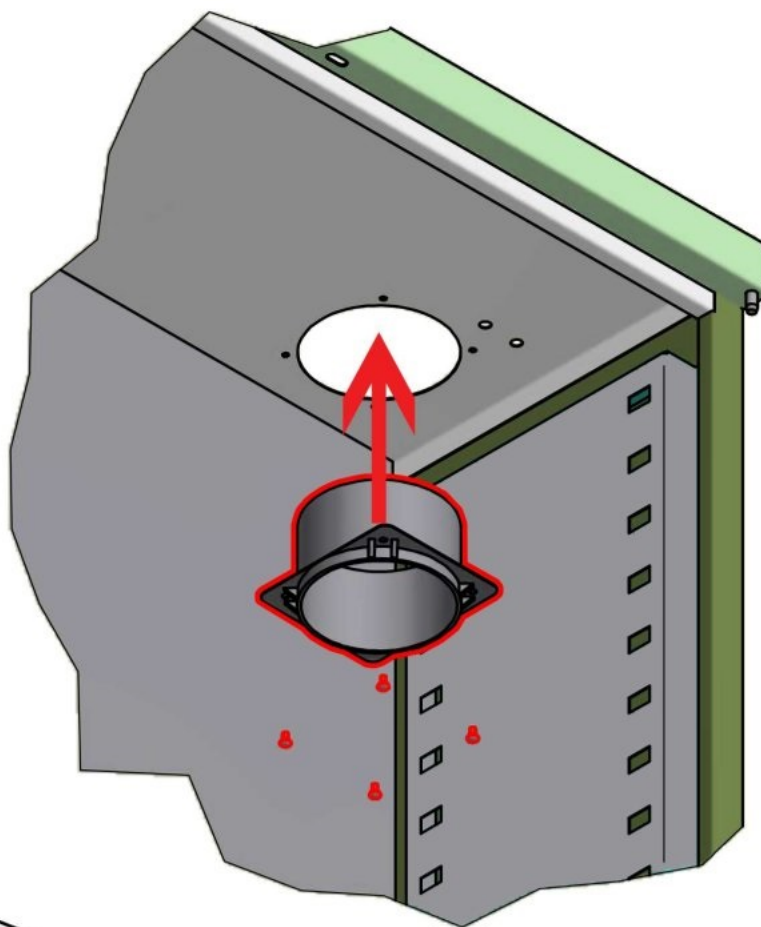

1x

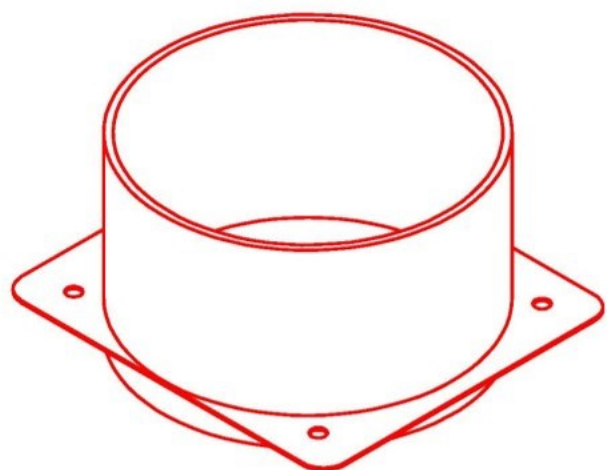

4x



Chemické skříně: 200600, 200601, 200590, 200591

nová technologie komína.

Chemické skříně vyrábíme s novým montovatelným plastovým komínem, který bude součástí balení chemické skříně, a zákazník si ho může jednoduše ručně připevnit na vrchní stranu skříně pomocí čtyř nýtů.

Návod na montáž plastového komína


Vybalení komína – Vybalte plastový komín z obalu.

Umístění komína – Položte ho na vrchní část chemické skříně z vnitřní části tak, aby otvory na komíně byly zarovnané s předvrtanými otvory na skříně.


Uchycení komína – Pomocí čtyř nýtů komín ručně připevněte ke skříně.

Kontrola stability – Ujistěte se, že komín je pevně připevněný a správně zarovnaný.

Pohled z venkovní strany skříně.


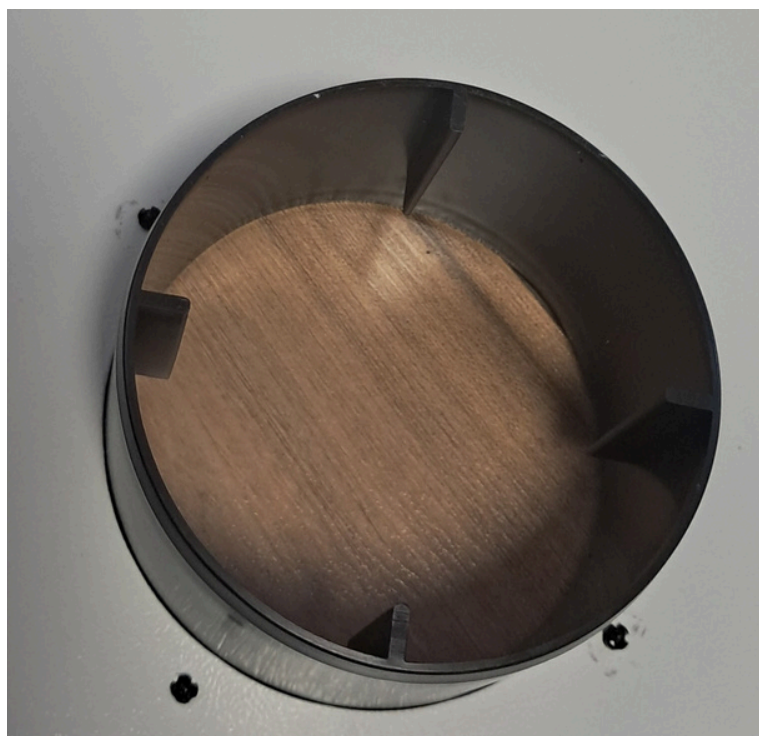


Pohled z vnitřní strany skříně.

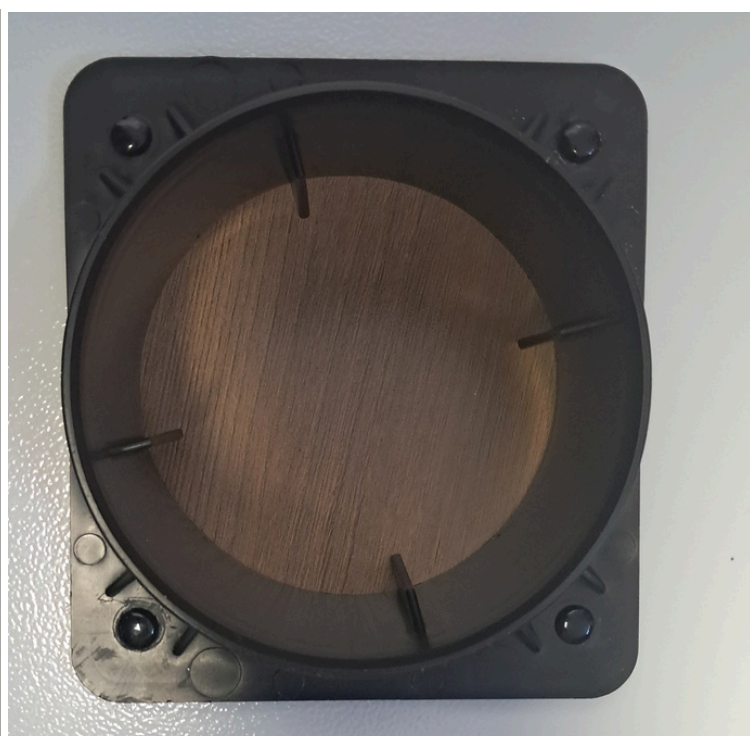


229275

MONTÁŽNÝ NÁVOD

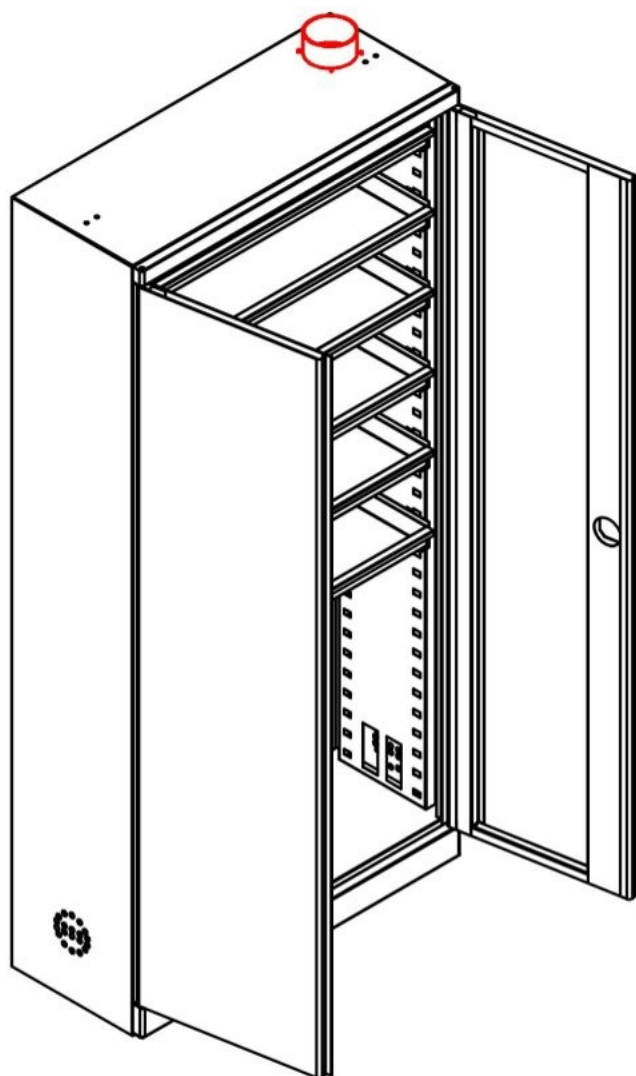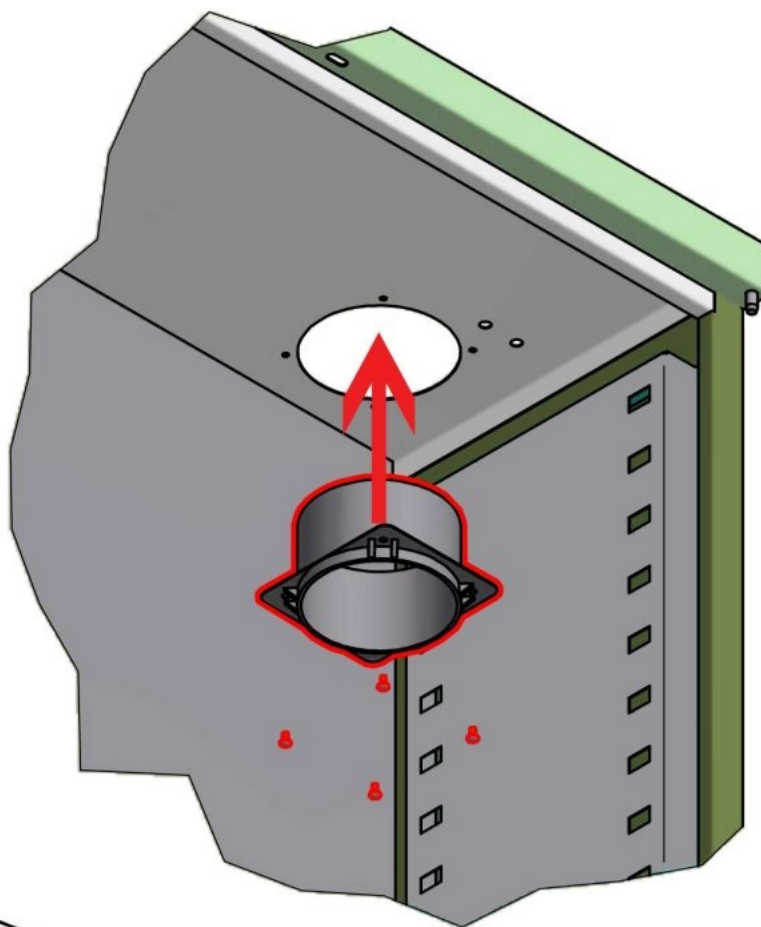

1x

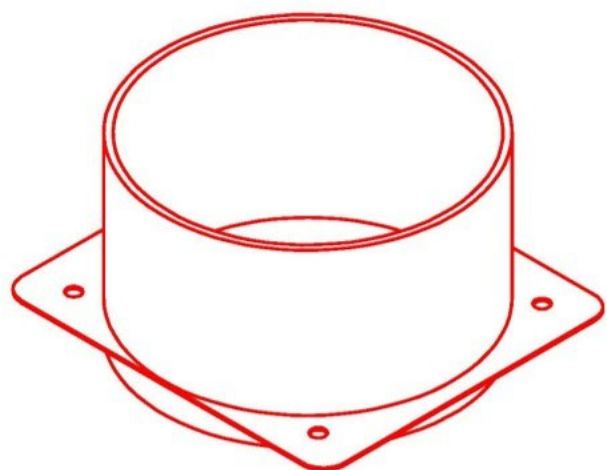

4x



Chemické skrine: 200600, 200601, 200590, 200591

nová technológia komína.

Chemické skrine vyrábame s novým montovateľným plastovým komínom, ktorý bude súčasťou balenia chemickej skrine, a zákazník si ho môže jednoducho ručne pripevniť na vrch skrine pomocou štyroch nitov.

Návod na montáž plastového komína


Vybalenie komína – Vyberte plastový komín z obalu.

Umiestnenie komína – Položte ho na vrchnú časť chemickej skrine z vnútra, tak, aby otvory na komíne boli zarovnané s predvŕtanými otvormi na skrini.


Prichytenie komína – Pomocou štyroch nitov komín ručne pripevnite k skrini.

Kontrola stability – Uistite sa, že komín je pevne pripevnený a správne zarovnaný.

Pohľad z vonkajšej strany skrine.


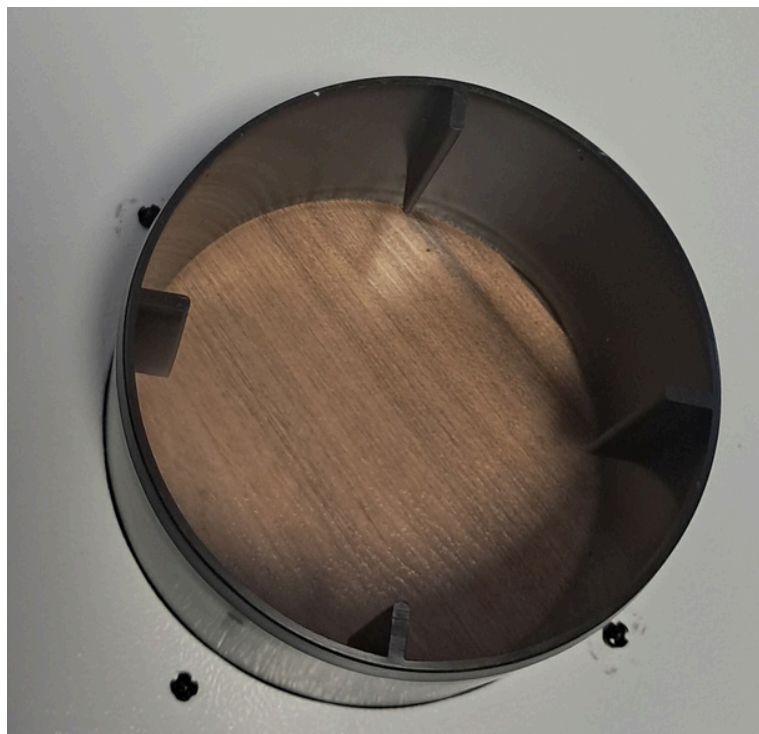


Pohľad z vnútornej strany skrine.

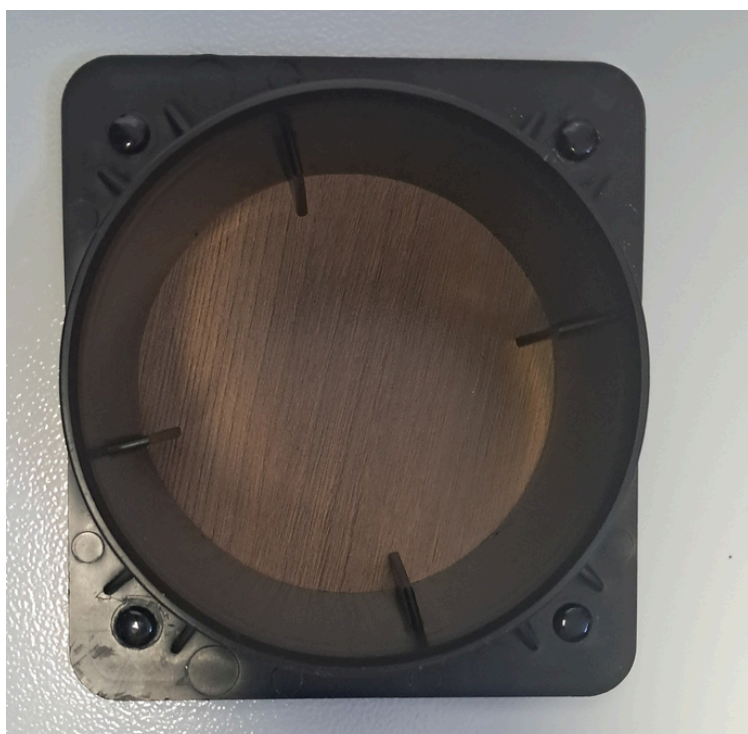


229275

INSTRUKCJA MONTAŻU

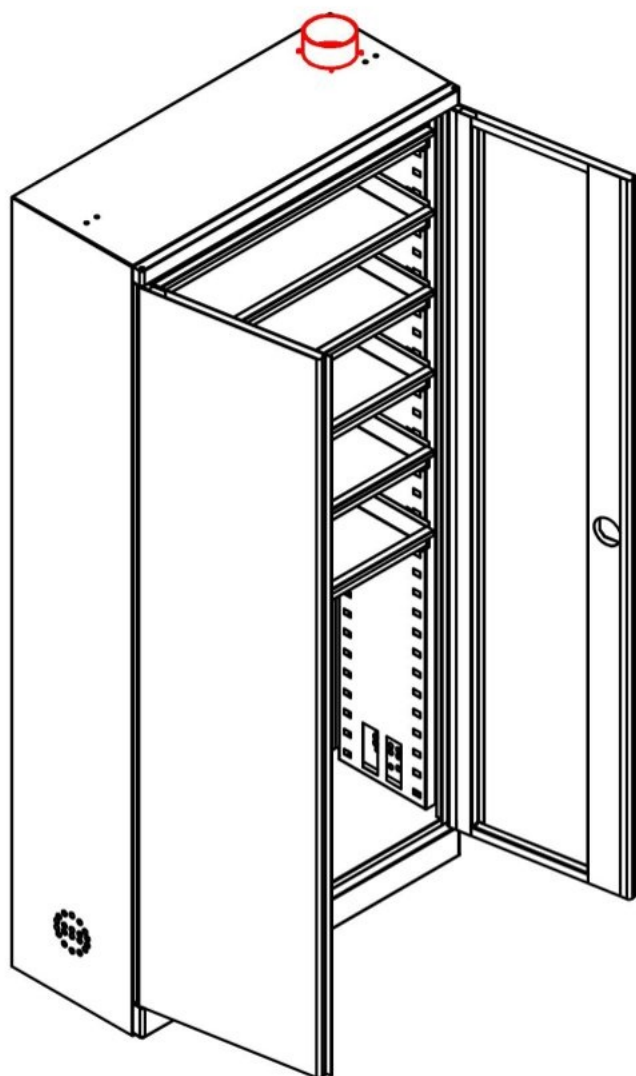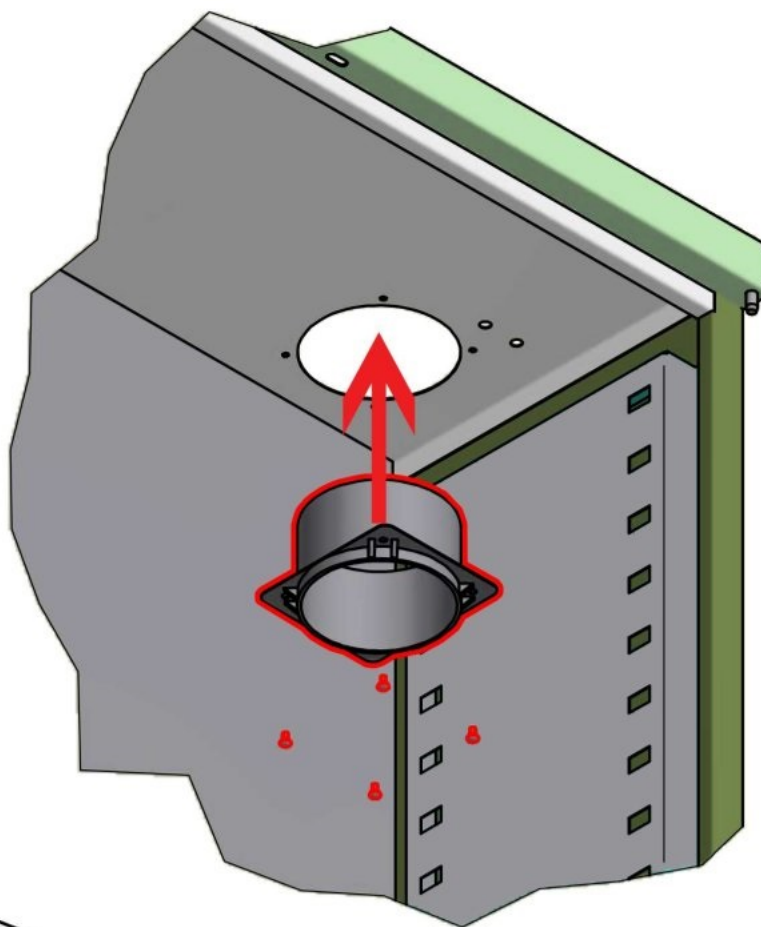

1x

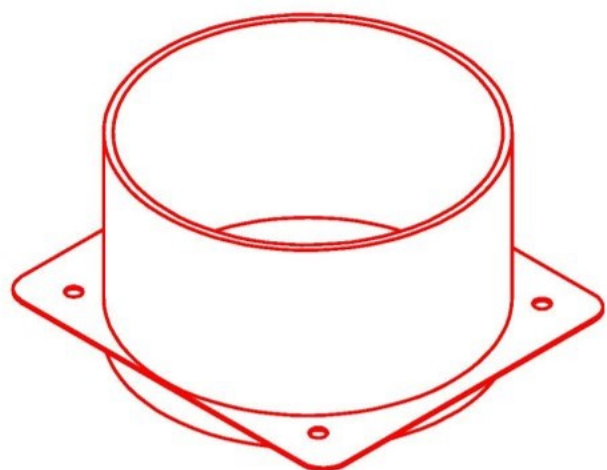

4x



Szafy chemiczne: 200600, 200601, 200590, 200591

nowa technologia komina.

Szafy chemiczne produkujemy z nowym, montowalnym plastikowym kominem, który będzie w zestawie szafy chemicznej, a klient może go łatwo ręcznie przymocować do górnej części szafy za pomocą czterech nitów.

Instrukcja montażu plastikowego komina


Rozpakowanie komina – Wyjmij plastikowy komin z opakowania.

Umieszczenie komina – Połóż go na górnej części szafy chemicznej od wewnętrznej strony tak, aby otwory na kominie były wyrównane z nawierconymi otworami w szafie.


Mocowanie komina – Za pomocą czterech nitów ręcznie przymocuj komin do szafy.

Kontrola stabilności – Upewnij się, że komin jest solidnie przymocowany i prawidłowo wyrównany.

Widok z zewnętrznej strony szafy.


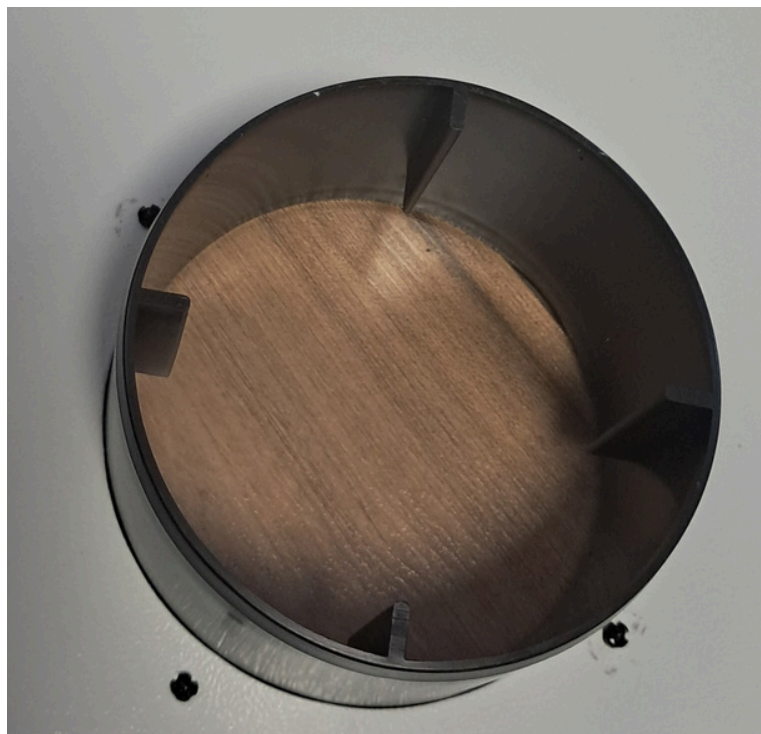


Widok z wewnętrznej strony szafy.

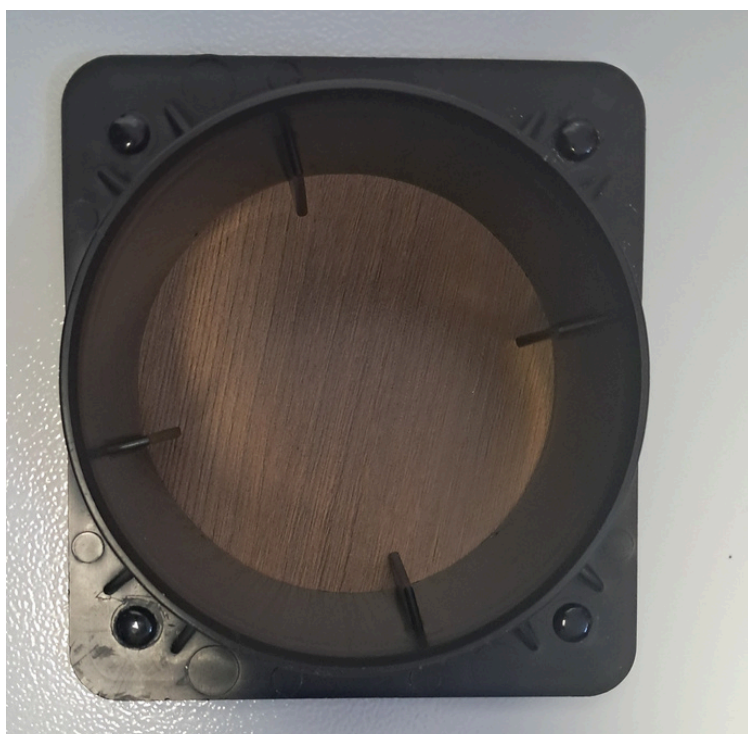


229275

MONTAGEANLEITUNG

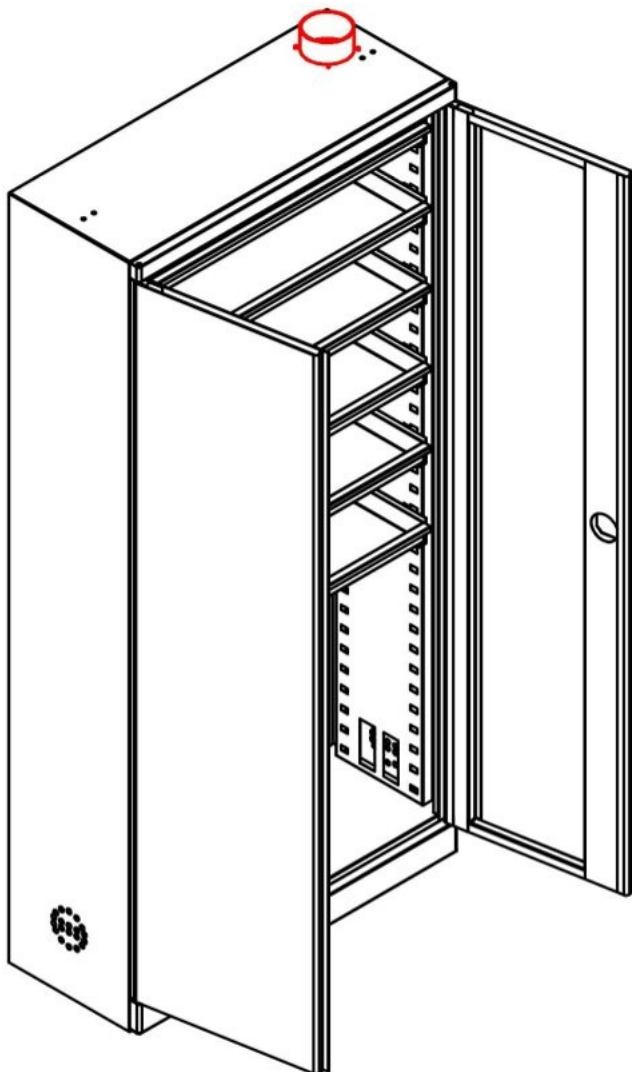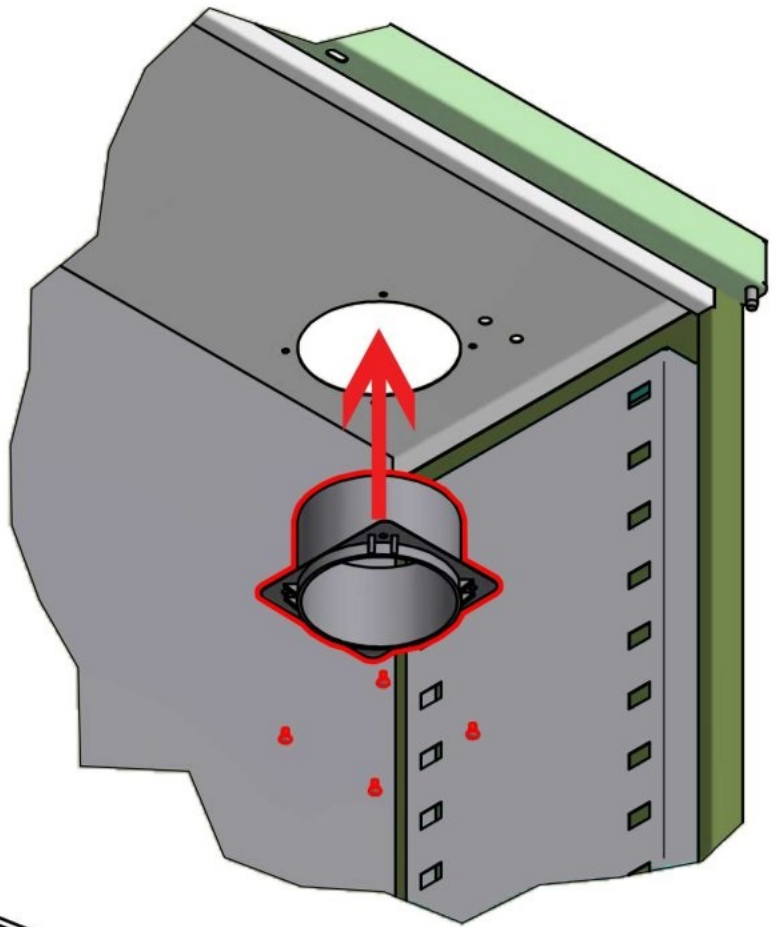

1x

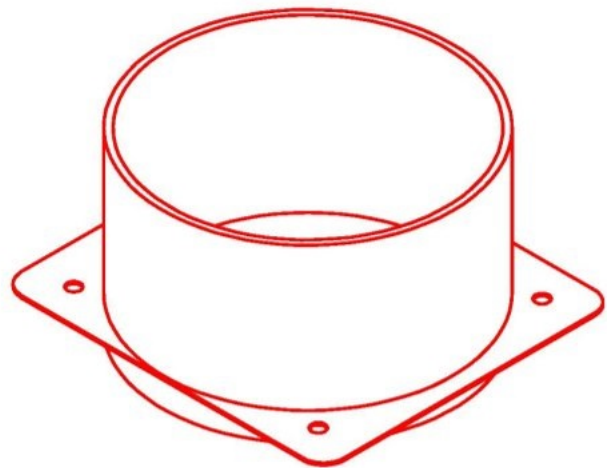

4x



Chemikalienschränke: 200600, 200601, 200590, 200591

neue Kamin-Technologie.

Wir produzieren Chemikalienschränke mit einem neuen, montierbaren Kunststoffkamin, der im Lieferumfang des Chemikalienschranks enthalten ist und den der Kunde einfach manuell mit vier Nieten an der Oberseite des Schrankes befestigen kann.

Montageanleitung für den Kunststoffkamin


Auspacken des Kamins – Nehmen Sie den Kunststoffkamin aus der Verpackung.

Positionierung des Kamins – Legen Sie ihn auf die Oberseite des Chemikalienschranks von innen, sodass die Öffnungen des Kamins mit den vorgebohrten Öffnungen im Schrank übereinstimmen.

Befestigung des Kamins – Befestigen Sie den Kamin manuell mit vier Nieten am Schrank.

Stabilitätskontrolle – Stellen Sie sicher, dass der Kamin fest befestigt und korrekt ausgerichtet ist.

Ansicht von der Außenseite des Schrankes.

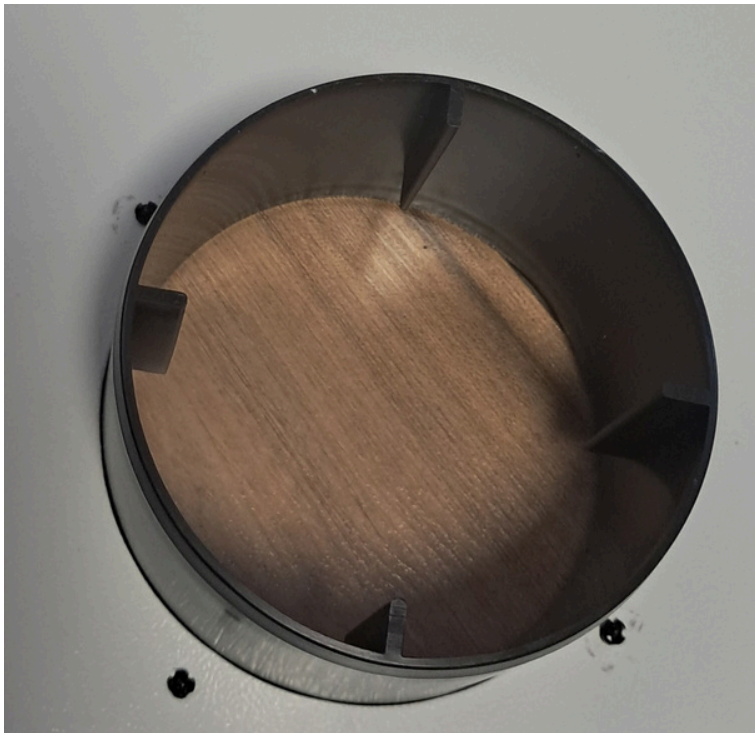

Ansicht von der Innenseite des Schrankes.

